


Para la detección del gen de la toxina B (tcdB) de cepas toxigénicas de *Clostridium difficile* (C. difficile) en muestras de heces sin consistencia (líquidas o blandas).  
Para uso con el analizador Revogene®. Consulte las instrucciones completas más recientes para saber cómo analizar correctamente los controles externos e interpretar los resultados.

## C. difficile

### PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

#### Como correr la prueba

1.

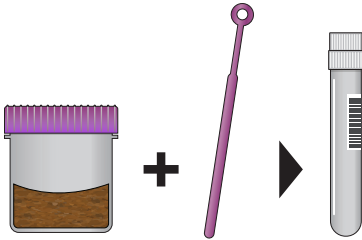


DTL Stool  
Quantity Example




- Agite con un vórtex la muestra de heces a alta velocidad durante 15 segundos.
- Usando el asa de transferencia desechable (ATD) facilitada, transfiera aproximadamente 5 µL de muestra al tubo de tampón de muestra (TTM) proporcionado. Elimine el exceso de heces blandas que pudiera haber fuera del asa.
- Agite con un vórtex el TTM a alta velocidad durante 15 segundos.
- Abra el precinto de la bolsa que contiene el PIE Revogene® C. difficile.

2.

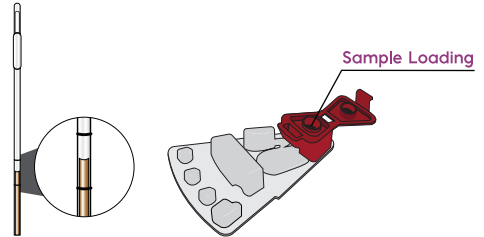

- Aspire el tampón de muestra (TM) con el dispositivo de transferencia desechable (DTD) apretando del todo el bulbo hasta que el nivel de líquido esté situado en algún punto entre las dos líneas del DTD.
- Dispense toda la muestra en la cámara de carga de la muestra del PIE.
- Cierre bien la tapa de la cámara de carga de la muestra.

3.

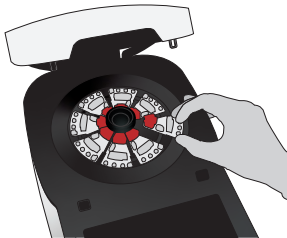

- Siga las instrucciones en pantalla para cargar el PIE de la prueba del paciente.
- Cargue las demás pruebas de pacientes. Si se están analizando menos de ocho (8) PIE, cargue PIE SIMULADOS en las posiciones restantes del carrusel.
- Escanee el anillo de retención y colóquelo en el carrusel.

4.



- Cierre la tapa del instrumento con ambas manos y compruebe que se ha quedado bloqueada.
- Seleccione <Iniciar> para iniciar el análisis y dejarlo en marcha.
- La tapa se abre al finalizar el análisis.
- Después del análisis, retire todos los PIE, incluidos los PIE SIMULADOS.
- Pulse el icono <Resultados> para ver los resultados analíticos.



Esta ilustración representa las últimas instrucciones de uso completas en el momento de la publicación. Consulte las últimas versiones completas de las instrucciones del ensayo y del analizador. [www.meridianbioscience.com/pi](http://www.meridianbioscience.com/pi)

#### USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive  
Cincinnati, Ohio 45244, USA  
Telephone: 513-271-3700

#### EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636  
E-mail: MBE-TechService@meridianbioscience.eu

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980  
Technical Support: 1-800-343-3858  
Information Fax: 513-272-5432  
Ordering Fax: 513-271-0124  
[meridianbioscience.com](http://meridianbioscience.com)