


## WERKWIJZE

### Uitoeren van de test

### C. difficile

Voor detectie van het toxine B (tcdB)-gen van toxigeen Clostridium difficile (C. difficile) in ongevormde (vloeibare of zachte) ontlastingsmonsters.  
Voor gebruik met het Revogene®-instrument.  
Raadpleeg de huidige volledige instructies voor het testen van de juiste externe controles en interpretatie van de uitkomsten.

1.

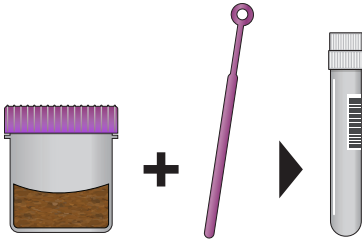


DTL Stool  
Quantity Example




- Vortex het ontlastingsmonster 15 seconden op hoge snelheid.
- Breng met behulp van de meegeleverde Disposable Transfer Loop (DTL) circa 5 µL van het monster over in de meegeleverde Sample Buffer Tube (SBT). Verwijder alle zachte ontlasting die zich mogelijk buiten de lus bevindt.
- Vortex de SBT 15 seconden op hoge snelheid.
- Open de zak met de Revogene® C. difficile PIE.

2.

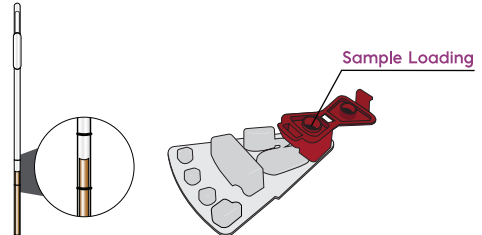

- Aspireer met behulp van de Disposable Transfer Tool (DTT) de Sample Buffer (SB) door het gehele bolletje samen te drukken totdat het vloeistofpeil ergens tussen de twee lijnen op de DTT staat.
- Spuit het gehele monster in de monsterlaadkamer van de PIE.
- Draai de dop van de monsterlaadkamer stevig aan.

3.

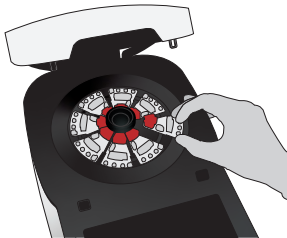

- Volg voor het laden van de PIE voor de patiëntentest de aanwijzingen op het scherm.
- Laad de resterende patiëntentests. Als er minder dan acht (8) PIE's worden getest, plaatst u MOCK PIE's in de overige carouselposities.
- Scan de borging en zet deze op de carousel.

4.



- Sluit het deksel van het instrument met beide handen en zorg dat het deksel zich vergrendelt.
- Selecteer Start om de test te starten; u hoeft verder niets te doen.
- Het deksel opent zich als de run voltooid is.
- Verwijder alle PIE's inclusief alle MOCK PIE's na de run.
- Tik op het pictogram Resultaten om de testresultaten te openen.



Deze afbeelding is een weergave van de huidige en complete aanwijzingen voor gebruik op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg de meest recente complete versies van de assay- en instrumentinstructies. [www.meridianbioscience.com/pi](http://www.meridianbioscience.com/pi)

#### USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive  
Cincinnati, Ohio 45244, USA  
Telephone: 513-271-3700

#### EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636  
E-mail: [MBE-TechService@meridianbioscience.eu](mailto:MBE-TechService@meridianbioscience.eu)

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980  
Technical Support: 1-800-343-3858  
Information Fax: 513-272-5432  
Ordering Fax: 513-271-0124  
[meridianbioscience.com](http://meridianbioscience.com)