


WERKWIJZE

Uitvoeren van de test

Strep A


Voor directe detectie van *Streptococcus pyogenes* (groep A β -hemolytische *Streptococcus*) -nucleïnezuren in keeluitstrijkjes.
Voor gebruik met het Revogene-instrument.
Raadpleeg de huidige volledige instructies voor het testen van de juiste externe controles en interpretatie van de uitkomsten.

1.

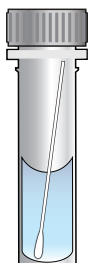

- Steek het keelmonsterstaafje in de Sample Buffer Tube (SBT) en breek het af.
- Vortex de SBT 15 seconden op hoge snelheid.
- Open de zak met de Revogene® Strep A PIE.

2.

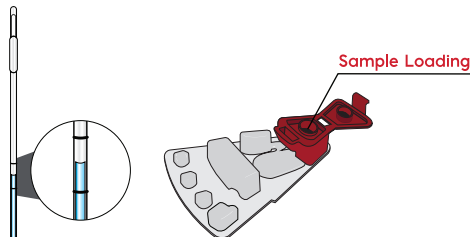

- Aspireer met behulp van de Disposable Transfer Tool (DTT) de Sample Buffer (SB) door het gehele bolletje samen te drukken totdat het vloeistofpeil ergens tussen de twee lijnen op de DTT staat.
- Spuit het gehele monster in de monsterlaadkamer van de PIE.
- Draai de dop van de monsterlaadkamer stevig aan.

3.



- Volg voor het laden van de PIE voor de patiëntentest de aanwijzingen op het scherm.
- Laad de resterende patiëntentests. Als er minder dan acht (8) PIE's worden getest, plaatst u MOCK PIE's in de overige carrouselposities.
- Scan de borgring en zet deze op de carrousel.

4.



- Sluit het deksel van het instrument met beide handen en zorg dat het deksel zich vergrendelt.
- Selecteer Start om de test te starten: u hoeft verder niets te doen.
- Het deksel opent zich als de run voltooid is.
- Verwijder alle PIE's inclusief alle MOCK PIE's na de run.
- Tik op het pictogram Resultaten om de testresultaten te openen.

Opmerking: De E-PRO-functie zal soms binnen 42 minuten al positieve resultaten kunnen weergeven.



Deze afbeelding is een weergave van de huidige en complete aanwijzingen voor gebruik op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg de meest recente complete versies van de assay- en instrumentinstructies. www.meridianbioscience.com/pi

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636
E-mail: MBE-TechService@meridianbioscience.eu

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com