


Voor de detectie en differentiatie van de bla_{PCP} , bla_{OXA-1} , bla_{VIM-1} , bla_{OXA-48} en bla_{NDP} -genesecties in verband met carbapenem-non-susceptible zuivere koloniën van Enterobacteriaceae, Acinetobacter baumannii, of Pseudomonas aeruginosa.

Voor gebruik met het Revogene-instrument.
Raadpleeg de huidige volledige instructies voor het testen van de juiste externe controles en interpretatie van de uitkomsten.

WERKWIJZE


Uitvoeren van de test

1.

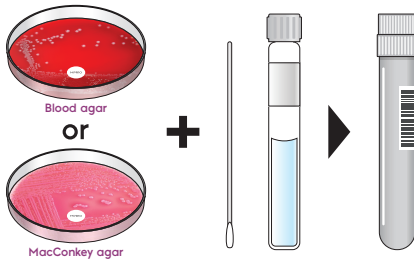


- Breng de koloniën over om een standaard 0,5 MacFarland-suspensie te verkrijgen.
- Vortex de 0,5 MacFarland-suspensie 15 seconden op hoge snelheid.
- Aspireer 15 μ L van de MacFarland-suspensie met behulp van een micropipet en plaats deze in de Sample Buffer Tube (SBT).
- Vortex de SBT 15 seconden op hoge snelheid.
- Open de zak met de Revogene® Carba C PIE.

2.

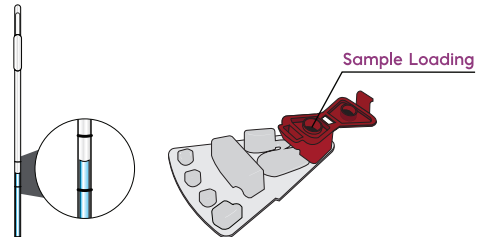

- Aspireer met behulp van de Disposable Transfer Tool (DTT) de Sample Buffer (SB) door het gehele bolletje samen te drukken totdat het vloeistofpeil ergens tussen de twee lijnen op de DTT staat.
- Spuit het gehele monster in de monsterlaadkamer van de PIE.
- Draai de dop van de monsterlaadkamer stevig aan.

3.

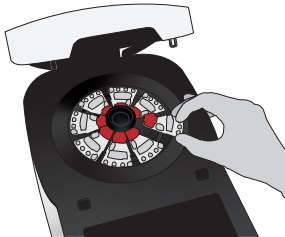

- Start het uitvoeren van de test door te navigeren naar het menu Run instellen. Selecteer Revogene® Carba C. Volg voor het laden van de PIE voor de patiëntentest de aanwijzingen op het scherm.
- Laad de resterende patiëntentests. Als er minder dan acht (8) PIE's worden getest, plaatst u MOCK PIE's in de overige carouselposities.
- Scan de borging en zet deze op de carousel.

4.



- Sluit het deksel van het instrument met beide handen en zorg dat het deksel zich vergrendelt.
- Selecteer Start om de test te starten: u hoeft verder niets te doen.
- Het deksel opent zich als de run voltooid is.
- Verwijder alle PIE's inclusief alle MOCK PIE's na de run.
- Tik op het pictogram Resultaten om de testresultaten te openen.



Deze afbeelding is een weergave van de huidige en complete aanwijzingen voor gebruik op het tijdstip van publicatie. Raadpleeg de meest recente complete versies van de assay- en instrumentinstructies. www.meridianbioscience.com/pi

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

EMEA, MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Phone: +39 0331433636
E-mail: MBE-TechService@meridianbioscience.eu

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com