

# alethia™

# C. difficile

#### 1a. Flüssiger Stuhl:

Mischen Sie die Probe sorgfältig. Tauchen Sie die Bürste vollständig ein.



#### 1b. Halbfester Sthul:

Benetzen Sie die Hälfte der Bürstenoberfläche. Drehen Sie dazu die Bürste an der Oberfläche der Probe entlang.





 Geben Sie die Bürste in das Gefäß für die Probenvorbereitung.
Brechen Sie den Stiel an der Markierung ab. Schließen Sie das Gefäß und vortexen Sie dieses für 10 Sekunden.



 Entfernen Sie den unteren Deckel und drücken Sie 5-10 Tropfen der Probe in das Gefäß für die Hitzebehandlung.




 Erhitzen Sie das Gefäß bei 95 C für 10 Minuten. Vortexen Sie dieses für 10 Sekunden.



5. Überführen Sie 50 μL der hitzebehandelten Probe in das Gefäß mit dem Reaktionspuffer. Vortexen Sie dieses für 10 Sekunden.



6. Übertragen Sie mit einer Mikropipette 50 µL aus dem Reaktionsgefäß in die (links) TEST-Kammer und anschließend 50 µL in die (rechts) KONTROLL-Kammer des Alethia™-Testgeräts.

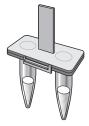

7. Schließen Sie den Riegel fest. Tippen Sie vorsichtig mit dem Finger an die zwei Kammern, um ggf. Luftblasen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen in den Kammern befinden.



8. Stellen Sie die Alethia™ Analysegefäße in das Alethia™ instrument Gerät und starten Sie die Amplifizierungsreaktion und die Detektion.



Diese Kurzanleitung repräsentiert die aktuelle Packungsbeilage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuellste Version der Packungsbeilage für einer vollständige Anleitung.

## USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive Cincinnati, Ohio 45244 USA Telephone: 513-271-3700

©2018 SN11017 REV. 09/18 DE-2019-01-16

## MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959 France Tel: +33 (0)1 4256 0440 Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31

Italy Tel: +39 O331 43 3636 Netherlands Tel: +31 (O)411 62 11 66

Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66 United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970 Orders/Customer Service: 1-800-543-1980 Technical Support: 1-800-343-3858 Information Fax: 513-272-5432 Ordering Fax: 513-271-0124 meridianbioscience.com

