

TESTVERFAHREN Kurzanleitung



1. Bewahren Sie die Rachenabstrichprobe in einem geeignetem nicht-nutritivem Transportmedium mit einem Tupfer/Schwamm (flüssiges Amies-Medium ohne Kohle oder flüssiges Stuart-Medium) auf.




2. Geben Sie den Einzeltupfer in das Gefäß für die Probenvorbereitung (SMP PREP) und brechen Sie den Stiel an der Markierung ab. Schließen Sie das Gefäß und vortexen Sie dieses für 10 Sekunden.




3. Entfernen Sie den unteren Deckel und drücken Sie 5-10 Tropfen der Probe in das Gefäß für die Hitzebehandlung.



4. Erhitzen Sie das Gefäß bei 95 C für 10 Minuten. Vortexen Sie dieses für 10 Sekunden.

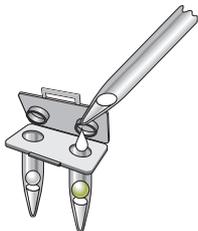

5. Überführen Sie mit einer Mikropipette zunächst 50 µL der hitzebehandelten Probe in die TEST-Kammer (Links) und anschließend 50 µL der hitzebehandelten Probe in die KONTROLL-Kammer (Rechts) des Alethia™ Analysegefäßes.

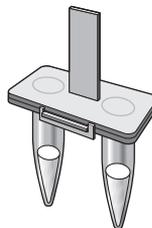

6. Schließen und sichern Sie den Riegel fest. Tippen Sie vorsichtig mit dem Finger an die zwei Kammern, um ggf. Luftblasen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen in den Kammern befinden.



7. Stellen Sie die Alethia™ Analysegefäßes in das Alethia™ Gerät und starten Sie die Amplifizierungsreaktion und die Detektion.

 Diese Kurzanleitung repräsentiert die aktuelle Packungsbeilage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuelle Version der Packungsbeilage für eine vollständige Anleitung.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxemburg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™