

# alethia™

## Mycoplasma Direct

### PROCEDURA DEL TEST

#### Come eseguire l'analisi



1. Conservare il campione sul tampone faringeo in un sistema di trasporto idoneo - terreno non nutritivo su spuga (Liquid Amies senza carbone, o Liquid Stuart).




2. Inserire un singolo tampone nel dispositivo SMP PREP, rompendo l'asta del tampone. Richiudere l'SMP PREP e agitare con il vortex per 10 secondi.




3. Premere per Trasferire 5-10 gocce di campione nella Provetta per Trattamento Termico.



4. Riscaldare la Provetta per Trattamento Termico Alethia™ a 95 C per 10 minuti. Agitare con il vortex 10 secondi.

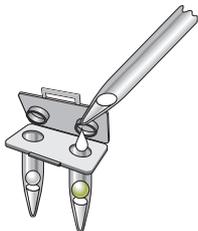

5. Usando una micropipetta, trasferire prima 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del TEST (Sinistra), poi trasferire 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del CONTROLLO (Destra) del Dispositivo Test Alethia™.

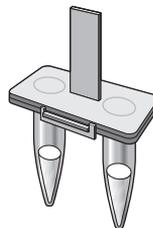

6. Chiudere e fissare saldamente la linguetta di chiusura. Picchiare delicatamente il dispositivo per rimuovere le bolle d'aria intrappolate nella parte inferiore delle provette. Esaminare attentamente le provette di reazione per assicurarsi che non vi siano rimaste bolle d'aria.



7. Inserire il Dispositivo di Test Alethia™ nello strumento Alethia™ e avviare la procedura di amplificazione e rilevamento.

 Questa illustrazione rispecchia quanto riportato nelle istruzioni per l'uso al momento della pubblicazione. Fare riferimento alla versione più aggiornata dell'Insero del Kit per la procedura dettagliata.

#### USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive  
Cincinnati, Ohio 45244 USA  
Telephone: 513-271-3700

#### MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959  
France Tel: +33 (0)1 4256 0440  
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31  
Italy Tel: +39 0331 43 3636  
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66  
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980  
Technical Support: 1-800-343-3858  
Information Fax: 513-272-5432  
Ordering Fax: 513-271-0124  
[meridianbioscience.com](http://meridianbioscience.com)

**meridian** BIOSCIENCE™