

alethia™

Mycoplasma Direct

PROCEDURA DE TESTARE


Cum se efectuează testul



1. A se păstra proba tampon pentru gat într-un mediu de transport adecvat nenutritiv cu compresă (Liquid Amies, fără cărbune sau lichid Stuart).




2. Introduceți un singur tampon SMP PREP, și rupeți mânerul tamponului. Puneți capacul lui SMP PREP și vortexați 10 secunde.

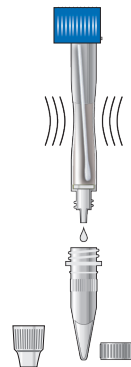


3. Stoareți 5-10 picături de proba în tubul de tratament termic.



4. Incubați tubul pentru tratare termică la 95° C timp de 10 minute. Amestecați timp de 10 secunde.

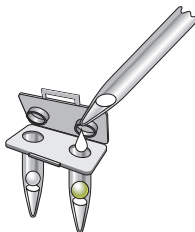

5. Utilizând o micropipetă, transferați 50 µL din proba tratată termic în compartimentul de TEST (stânga), apoi transferați 50 µL în compartimentul de CONTROL (dreapta) din dispozitivul de testare Alethia™.

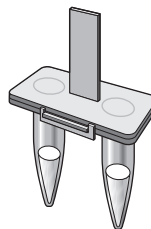

6. Închideți și fixați dispozitivul de blocare. Loviți ușor dispozitivul pentru a elimina bulele de aer prinse pe fundul tuburilor. Examinati cu atenție tuburile de reacție pentru a vă asigura că nu sunt bule de aer rămase în tub.



7. Introduceți dispozitivul de testare Alethia™ instrument și inițiați reacția de amplificare și de detecție.

 Această ilustrare este reprezentativa pentru produs în momentul publicării.
Vă rugăm să consultați cea mai recentă versiune a instrucțiunilor complete.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244, USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™