

TESTVERFAHREN Kurzanleitung




1. Probennahme:

Die nasopharyngealen Abstrichproben sollten übereinstimmend mit den Vorgaben der jeweiligen Einrichtung zur Entnahme klinischer Proben bei einer *Bordetella pertussis*-Infektion entnommen werden.




2. Geben Sie die Abstrichprobe in das Probenpufferröhrchen. Schneiden Sie den Tupferschaft ab, damit die Probe sicher in das Röhrchen passt. Schließen Sie das Gefäß und vortexen Sie dieses für 45 Sekunden.

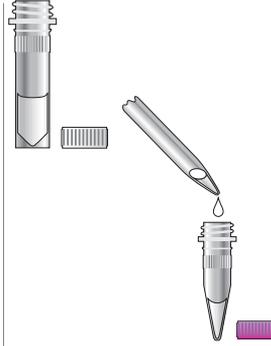

3. Überführen Sie 50 µL aus dem Probenpufferröhrchen in das Gefäß mit der Assay-Kontrolle. Vortexen Sie dieses für 10 Sekunden.




4. Erhitzen Sie das Gefäß mit der Assay-Kontrolle bei 95 °C für 10 Minuten. Vortexen Sie dieses anschließend für 10 Sekunden.

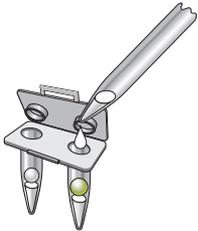

5. Überführen Sie mit einer Mikropipette zunächst 50 µL der hitzebehandelten Probe in die TEST-Kammer (Links) und anschließend 50 µL der hitzebehandelten Probe in die KONTROLL-Kammer (Rechts) des Alethia™ Analysegefäßes.



6. Geben Sie einen Tropfen Mineralöl sowohl in die TEST-als auch in die KONTROLL-Kammer.

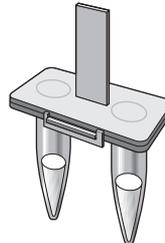

7. Schließen und sichern Sie den Riegel fest. Tippen Sie vorsichtig mit dem Finger an die zwei Kammern, um ggf. Luftblasen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen in den Kammern befinden.



8. Stellen Sie die Alethia™ Analysegefäße in das Alethia™ instrument Gerät und starten Sie die Amplifizierungsreaktion und die Detektion.

 Diese Kurzanleitung repräsentiert die aktuelle Packungsbeilage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuellste Version der Packungsbeilage für eine vollständige Anleitung.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™

TESTDURCHFÜHRUNG Kurzanleitung




1. Vortexen Sie das Eswab Röhrchen mit der Abstrichprobe für mindestens 10 Sekunden, um die Probe zu eluieren.



2. Geben Sie 25 µL des Mediums in das Gefäß mit der Assay-Kontrolle.




3. Erhitzen Sie das Gefäß mit der Assay-Kontrolle bei 95 C für 10 Minuten. Vortexen Sie dieses anschließend für 10 Sekunden.

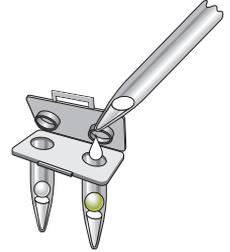

4. Überführen Sie mit einer Mikropipette zunächst 50 µL der hitzebehandelten Probe in die TEST-Kammer (Links) und anschließend 50 µL der hitzebehandelten Probe in die KONTROLL-kammer (Rechts) des Alethia™ Analysegefäßes.



5. Geben Sie einen Tropfen Mineralöl sowohl in die TEST-als auch in die KONTROLL-Kammer.

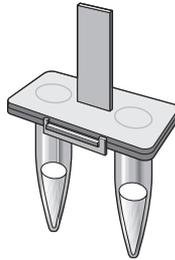

6. Schließen und sichern Sie den Riegel fest. Tippen Sie vorsichtig mit dem Finger an die zwei Kammern, um ggf. Luftblasen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Luftblasen in den Kammern befinden.



7. Stellen Sie die Alethia™ Analysegefäße in das Alethia™ instrument Gerät und starten Sie die Amplifizierungsreaktion und die Detektion.

 Diese Kurzanleitung repräsentiert die aktuelle Packungsbeilage zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Bitte beziehen Sie sich auf die aktuellste Version der Packungsbeilage für eine vollständige Anleitung.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com