

# alethia™

### **Pertussis**




#### 1. Raccolta del campione:

il prelievo dei campioni nasofaringei deve essere eseguito in conformità con le procedure istituzionali per la raccolta di campioni clinici per l'infezione da Bordetella pertussis.



2. Immergere il tampone nella provetta contenente il Tampone di Reazione. Tagliare il tampone, richiudere la provetta e agitare con il vortex per 45 secondi.

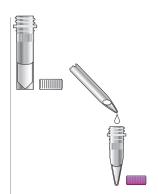

3. Trasferire 50 µL dal Tampone di Reazione alla provetta con il Reagente di Controllo. Agitare con il vortex per 10 secondi.




4. Riscaldare la provetta con il Reagente di Controllo a 95 C per 10 minuti Agitare con il vortex per 10 secondi.



5. Usando una micropipetta, trasferire prima 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del TEST (Sinistra), poi trasferire 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del CONTROLLO (Destra) del Dispositivo Test Alethia™.



6. Aggiungere 1 goccia di Olio Minerale alle provette TEST e CONTROLLO.

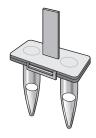

7. Chiudere e fissare il tappo di sicurezza. Picchiettare delicatamente il dispositivo per eliminare le bolle d'aria sul fondo della provetta. Esaminare attentamente le provette di reazione per assicurarsi che non vi siano rimaste bolle d'aria nella provetta.



8. Inserire il dispositivo Alethia™ nell'strumento Altheia™ed iniziare la reazione di amplificazione e rilevazione.



**USA/CORPORATE OFFICE** 3471 River Hills Drive Cincinnati, Ohio 45244 USA Telephone: 513-271-3700

©2018 SN11026 REV. 09/18 IT-2019-01-28

#### MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (O)6789 5959 France Germany

Questa illustrazione è rappresentativa delle attuali istruzioni per l'uso al momento della pubblilcazione.

Tel: +33 (O)1 4256 O44O Tel: +49 (O)3371 6O 222 31

Tel: +39 O331 43 3636 Italy Netherlands Tel: +31 (O)411 62 11 66 United Kingdom Tel: +44 (O)2O 8453 797O

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980 Technical Support: 1-800-343-3858 Information Fax: 513-272-5432 Ordering Fax: 513-271-0124 meridianbioscience.com







## **Fswab**



1. Agitare con il vortex la provetta Eswab contenente il tampone con il campione per un minimo di 10 secondi per eluire il campione.



2. Trasferire 25 µL del terreno di transporto nella provetta con il Reagente di Controllo.




3. Riscaldare la provetta con il Reagente di Controllo a 95 C per 10 minuti. Agitare con il vortex per 10 secondi.



4. Usando una micropipetta, trasferire prima 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del TEST (Sinistra), poi trasferire 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del CONTROLLO (Destra) del Dispositivo Test Alethia™.



5. Aggiungere 1 goccia di Olio Minerale alle provette TEST e CONTROLLO.

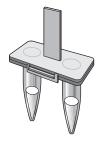

6. Chiudere e fissare il tappo di sicurezza. Picchiettare delicatamente il dispositivo per eliminare le bolle d'aria sul fondo della provetta. Esaminare attentamente le provette di reazione per assicurarsi che non vi siano rimaste bolle d'aria nella provetta.



7. Inserire il dispositivo Alethia™ nell'strumento Alethia™ed iniziare la reazione di amplificazione e rilevazione.



3471 River Hills Drive Cincinnati, Ohio 45244 USA Telephone: 513-271-3700

©2018 SN11026 REV. 09/18 IT-2019-01-28

#### MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (O)6789 5959 France Germany Italy

Questa illustrazine è rappresentativa delle attuali istruzioni per l'uso al momento della pubblicazione.

Tel: +33 (O)1 4256 O44O Tel: +49 (O)3371 6O 222 31

Tel: +39 O331 43 3636 Netherlands Tel: +31 (O)411 62 11 66 Tel: +44 (O)2O 8453 797O United Kingdom

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980 Technical Support: 1-800-343-3858 Information Fax: 513-272-5432 Orderina Fax: 513-271-0124 meridianbioscience.com

