

PROCEDURA DEL TEST

Come eseguire l'analisi



1. Raccolta del campione:
il prelievo dei campioni nasofaringei deve essere eseguito in conformità con le procedure istituzionali per la raccolta di campioni clinici per l'infezione da *Bordetella pertussis*.



2. Aggiungere 50 µL del reagente di Pre trattamento ricostituito a una provetta col Tampone di Reazione etichettata.




3. Immergere il tampone nella provetta contenente il Tampone di Reazione. Tagliare il tampone, richiudere la provetta e agitare con il vortex per 45 secondi.



4. Trasferire 50 µL dal Tampone di Reazione alla provetta con il Reagente di Controllo. Agitare con il vortex per 10 secondi.




5. Riscaldare la provetta con il Reagente di Controllo a 95 C per 10 minuti. Agitare con il vortex per 10 secondi.

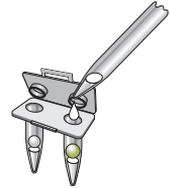

6. Usando una micropipetta, trasferire prima 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del TEST (Sinistra), poi trasferire 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del CONTROLLO (Destra) del Dispositivo Test Alethia™.



7. Aggiungere 1 goccia di Olio Minerale alle provette TEST e CONTROLLO.

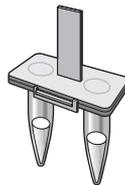

8. Chiudere e fissare il tappo di sicurezza. Picchiare delicatamente il dispositivo per eliminare le bolle d'aria sul fondo della provetta. Esaminare attentamente la provetta di reazione per assicurarsi che non vi siano rimaste bolle d'aria nella provetta.



9. Inserire il dispositivo Alethia™ nell'strumento Alethia™ ed iniziare la reazione di amplificazione e rilevazione.

 Questa illustrazione è rappresentativa delle attuali istruzioni per l'uso al momento della pubblicazione. Fare riferimento alla versione più aggiornata delle istruzioni per l'uso per la procedura dettagliata.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com


PROCEDURA DEL TEST Come eseguire l'analisi



1. Aggiungere 50 µL del reagente di Pre trattamento ricostituito a una provetta col Tampone di Reazione contenente il campione del paziente.




2. Richiudere la provetta e agitare con il vortex per 10-15 secondi.

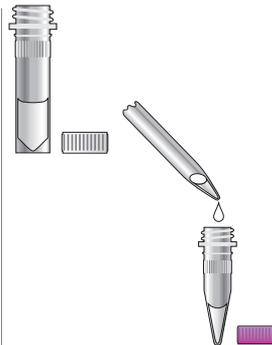

3. Trasferire 50 µL dal Tampone di Reazione alla provetta con il Reagente di Controllo. Agitare con il vortex per 10 secondi.




4. Riscaldare la provetta con il Reagente di Controllo a 95 C per 10 minuti. Agitare con il vortex per 10 secondi.

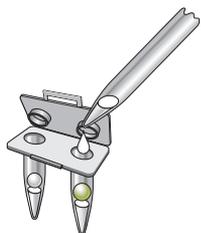

5. Usando una micropipetta, trasferire prima 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del TEST (Sinistra), poi trasferire 50 µL del campione trattato termicamente nella camera del CONTROLLO (Destra) del Dispositivo Test Alethia™.



6. Aggiungere 1 goccia di Olio Minerale alle provetta TEST e CONTROLLO.

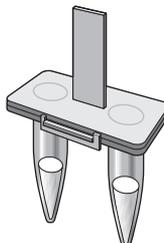

7. Chiudere e fissare il tappo di sicurezza. Picchiettare delicatamente il dispositivo per eliminare le bolle d'aria sul fondo della provetta. Esaminare attentamente la provetta di reazione per assicurarsi che non vi siano rimaste bolle d'aria nella provetta.



8. Inserire il dispositivo Alethia™ nell'strumento Alethia™ ed iniziare la reazione di amplificazione e rilevazione.

 Questa illustrazione è rappresentativa delle attuali istruzioni per l'uso al momento della pubblicazione. Fare riferimento alla versione più aggiornata delle istruzioni per l'uso per la procedura dettagliata.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com