



PROCEDURA DEL TEST


Come eseguire l'analisi

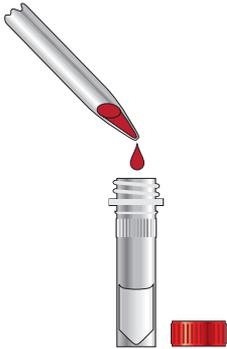


1. Miscelare la provetta di raccolta del sangue capovolgendola 2-3 volte. Aggiungere 50 μ L di campione alla provetta Tampone I Alethia™. Miscelare capovolgendo 5 volte e lasciare incubare per 2 minuti.

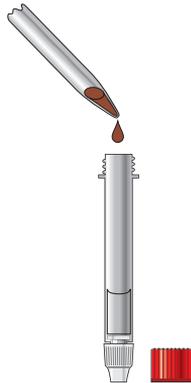


2. Miscelare il campione preparato capovolgendolo 5 volte e trasferire immediatamente 50 μ L all'Apparato SMP PREP IV. Miscelare capovolgendo 5 volte l'SMP PREP IV.

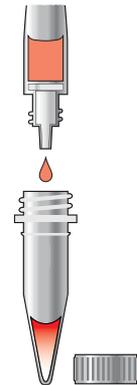

3. Rimuovere il cappuccio dal puntale dell'Apparato SMP PREP IV e premere delicatamente per trasferire 5-10 gocce in una Provetta I pulita.

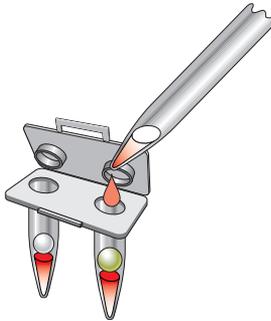

4. Con una micropipetta, trasferire 50 μ L di campione nelle due camere del TEST (Sinistra) e del CONTROLLO (Destra) del Dispositivo Test Alethia™ Malaria.

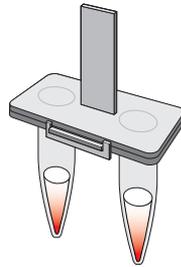

5. Chiudere e fissare saldamente la linguetta di chiusura. Picchiettare delicatamente il dispositivo per rimuovere le bolle d'aria intrappolate nella parte inferiore delle provette. Esaminare attentamente le provette di reazione per assicurarsi che non vi siano rismaste bolle d'aria.



6. Inserire i Dispositivi di Test Alethia™ nello strumento Alethia™ e avviare la reazione di amplificazione e rilevamento selezionando il programma per la Malaria.



Questa illustrazione è rappresentativa della attuali istruzioni per l'uso al momento della pubblicazione. Fare riferimento alla versione più aggiornata dell'Insero del Kit per la procedura dettagliata.

USA/CORPORATE OFFICE

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244 USA
Telephone: 513-271-3700

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxembourg Tel: +32 (0)6789 5959
France Tel: +33 (0)1 4256 0440
Germany Tel: +49 (0)3371 60 222 31
Italy Tel: +39 0331 43 3636
Netherlands Tel: +31 (0)411 62 11 66
United Kingdom Tel: +44 (0)20 8453 7970

Orders/Customer Service: 1-800-543-1980
Technical Support: 1-800-343-3858
Information Fax: 513-272-5432
Ordering Fax: 513-271-0124
meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE™